



Argo Knotless[®]

FAMILIE DER KNOTENLOSEN FADENANKER

Die nächste Evolutionsstufe in der fortschrittlichen Fadenanker-Technologie.
Ob Eingriffe an der Schulter oder am Fuß, Argo Knotless[®] setzt neue
Standards in der Orthopädie




To learn more, call
1-866-4CONMED (Toll Free)
727-214-3000 (International)
or visit www.CONMED.com.



Spannung, der man vertrauen kann

Die Smart Tension Technologie

Die Smart Tension Technologie ermöglicht präzise Spannungsanpassung und sorgt für gleichbleibende Fadenspannung vom Einsetzen bis zur Fixierung. Anwender kontrollierte Spannung erlaubt die Echtzeit-Anpassung für exakte Gewebeadaptation. Die vergrößerte Fadenaufnahme der Argo Knotless® Fadenanker erleichtert das Laden und Spannen der Fäden und steigert die Effizienz und Kontrolle während des Eingriffs.

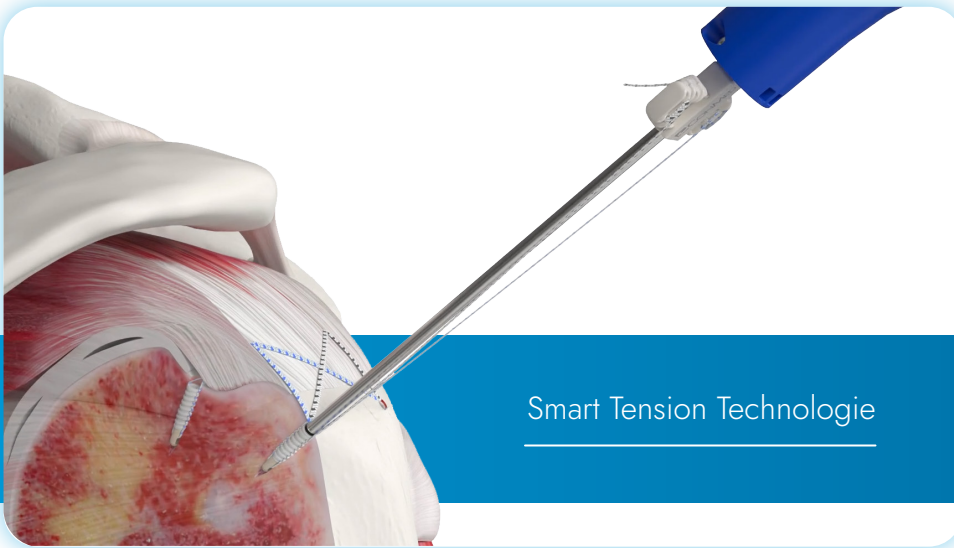

Effizienz trifft Präzision


Ein optimierter Ansatz. Bei jedem Eingriff

Erlebe optimierte Effizienz und Zuverlässigkeit bei jedem Eingriff – dank des hochmodernen Designs von Argo Knotless®. Das fortschrittliche Gewindedesign sorgt für eine robuste Fixation und minimiert das Risiko eines Anker-Ausreißens, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.




State-of-the-art
buttress thread


Vergleichstests

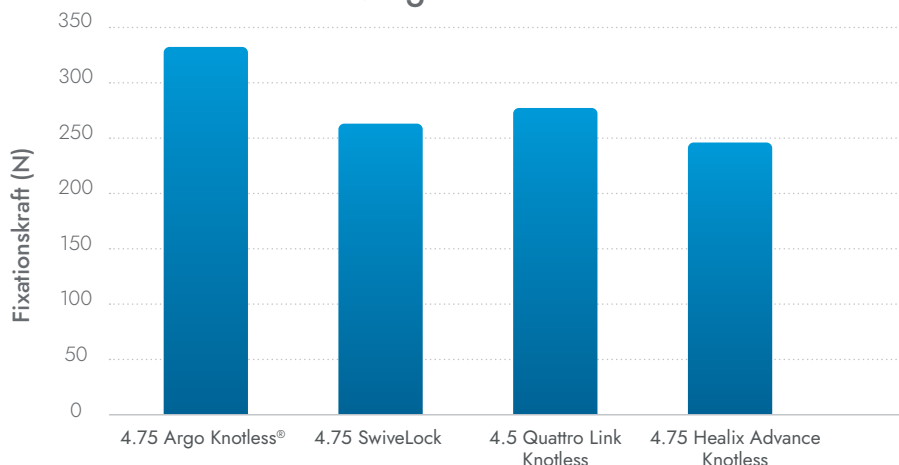

¹ PDD1811996, PDD1807728

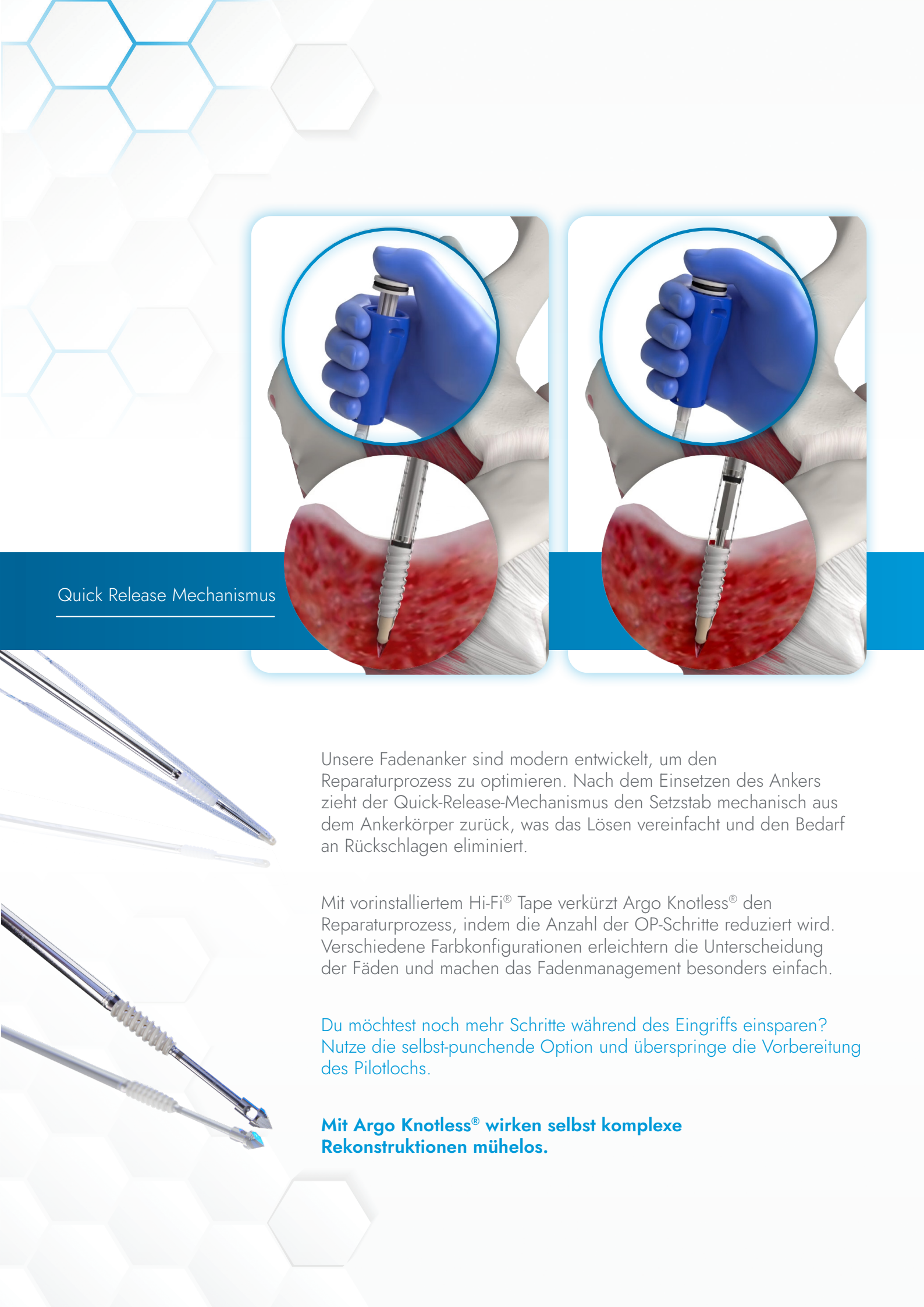

Quick Release Mechanismus

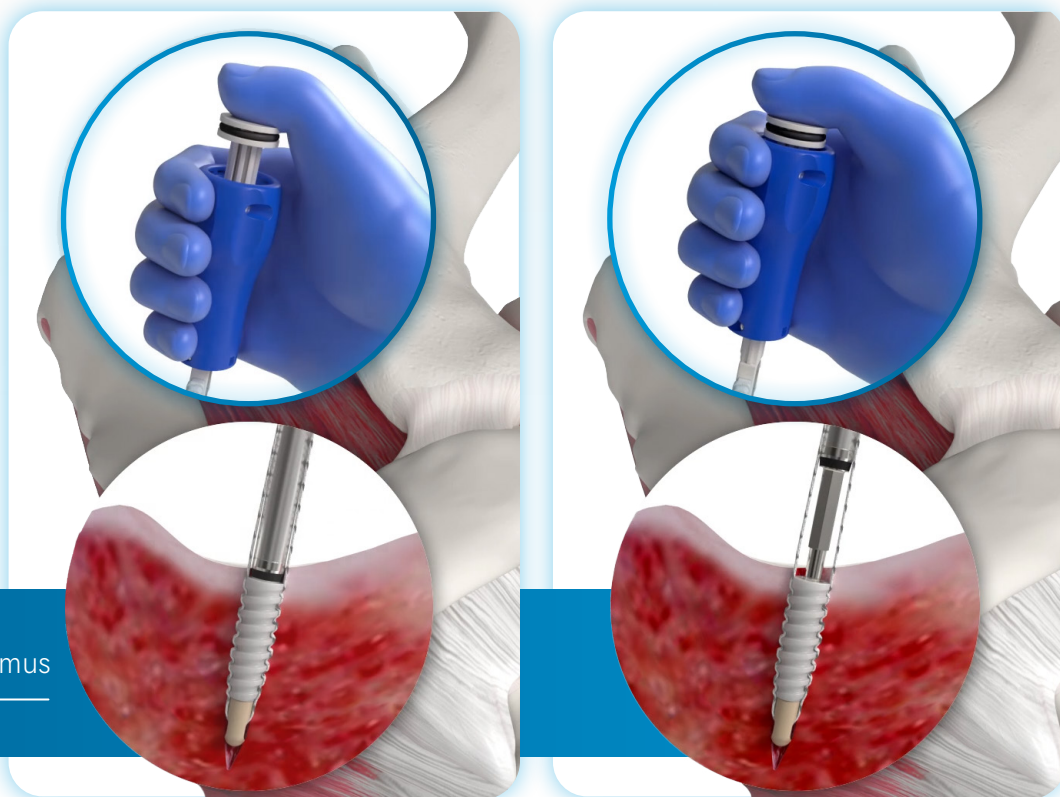

Unsere Fadenanker sind modern entwickelt, um den Reparaturprozess zu optimieren. Nach dem Einsetzen des Ankers zieht der Quick-Release-Mechanismus den Setzstab mechanisch aus dem Ankerkörper zurück, was das Lösen vereinfacht und den Bedarf an Rückschlägen eliminiert.

Mit vorinstalliertem Hi-Fi® Tape verkürzt Argo Knotless® den Reparaturprozess, indem die Anzahl der OP-Schritte reduziert wird. Verschiedene Farbkonfigurationen erleichtern die Unterscheidung der Fäden und machen das Fadenmanagement besonders einfach.

Du möchtest noch mehr Schritte während des Eingriffs einsparen? Nutze die selbst-punchende Option und überspringe die Vorbereitung des Pilotlochs.

Mit Argo Knotless® wirken selbst komplexe Rekonstruktionen mühelos.


Das Hi-Fi® Tape des Vertrauens

Weich, wo es zählt. Stark, wo es notwendig ist.

Erziele herausragende Ergebnisse mit Argo Knotless®.

Das Hi-Fi® Tape von CONMED ist 69 % weniger abrasiv als der führende Wettbewerber bei der Messung von Sehnendurchriss und bietet eine breitere Kompression als #2-Fäden für eine verbesserte Sehnen-zu-Knochen-Adaptation.

Sehnendurchriss verursacht durch Fadenband

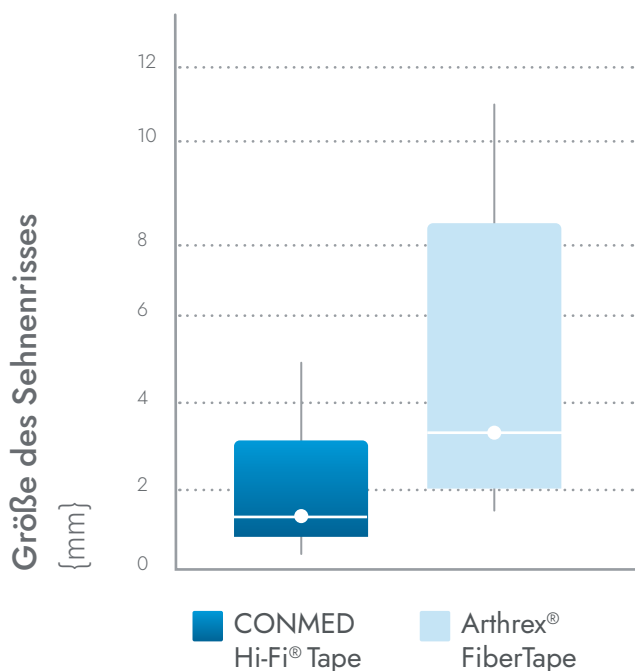

Ergebnisse

	CONMED Hi-Fi® Tape	Arthrex FiberTape
Medianer Defekt nach 50 Zyklen (mm) ¹	1.02	3.29
Mittlerer prozentualer Anteil des durch das jeweilige Tape verursachten Defekts ¹	27%	73%

Quellen:

1. Juggerknot 2.9 nur als doppelt vorgeladene Version erhältlich. Für diesen Vergleich wurde der Y-Knot RC im doppelt vorgeladenen Zustand im 15 pcf-Knochenmodell getestet.
2. Daten aus porcinen Knochen, im Unternehmen vorhanden. Test mit dreifach vorgeladenem Anker durchgeführt.
3. Interne Daten, "Surface Area Calculations".



Die Argo Knotless® Familie

Produktübersicht und Bestellinformationen

Beschreibung		Katalognummer
Argo PEEK		
4,75 mm Argo Knotless® Fadenanker mit 1 mm Hi-Fi® Tape		K475
5,5 mm Argo Knotless® Fadenanker mit 1 mm Hi-Fi® Tape		K55
4,75 mm Argo Knotless® selbst-punchender Fadenanker mit 1 mm Hi-Fi® Tape		SPK475
5,5 mm Argo Knotless® selbst-punchender Fadenanker mit 1 mm Hi-Fi® Tape		SPK55
Instrumente	Wiederverwendbar	Einweg
4,75/5,5 mm Argo Knotless® glatter Punch	K4755RSP	K4755DSP
4,75/5,5 mm Argo Knotless® konischer Broaching Punch	K4755RTBP	K4755DTBP
4,75 mm Argo Knotless® Tap	K475RTAP	K475DTAP
5,5 mm Argo Knotless® Tap	K55RTAP	K55DTAP





Imagine what we could do together.



CONMED Corporation | 11311 Concept Blvd., Largo, FL 33773 | www.CONMED.com



Service & Support